



UNIVERSIDAD PERUANA  
**CAYETANO HEREDIA**

# CALORA

Integrantes:

- Fabricio Estrada
- Jairo Cochachin
- Ángela Chávez
- Carla Chumbe
- Arnie Collachagua
- Lindsey Durán





# ANÁLISIS DEL CASO

Paciente diagnosticada con enfermedad de Camurati–Engelmann, patología genética rara que compromete el desarrollo óseo y genera dolor y entumecimiento en las extremidades inferiores, especialmente durante la noche.

Estos síntomas afectan su descanso y rendimiento académico, constituyendo la principal necesidad clínica a abordar.

Según la literatura pediátrica, el dolor neuropático infantil se caracteriza por hormigueo, hipersensibilidad y molestias persistentes, con una prevalencia del 15–25 % en población pediátrica, afectando principalmente las extremidades inferiores






# ANÁLISIS DEL CASO


La necesidad prioritaria identificada en la paciente es disminuir el dolor y el entumecimiento en las extremidades inferiores, síntomas que interfieren con su descanso nocturno y su rendimiento escolar.

Por ello, el abordaje terapéutico debe centrarse en aliviar el dolor y mejorar la función muscular mediante estrategias no invasivas que favorezcan la circulación, la relajación y el bienestar general. no s

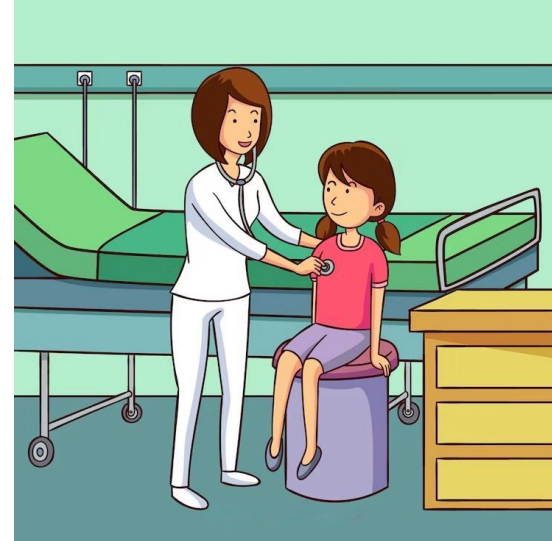

# ESTADO DEL ARTE

## Patente 1

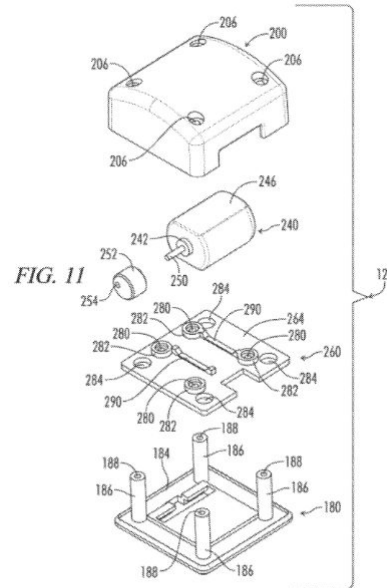

## SYSTEM AND APPARATUS TO APPLY VIBRATION, THERMAL AND COMPRESSIVE THERAPY

- **Número de patente / Publicación:** US20230084903A1
- **Inventores:** Wenbin Li, Ke Xu
- **Año de publicación:** 16 de marzo de 2023
- **Entidad solicitante:** Tammy Hancock


### Resumen Funcional:

Aparato para proporcionar tratamiento combinando calor localizado mediante elementos calefactores , masaje a través de vibración controlable por el usuario y un sistema de compresión.

- Incluye correas ajustables tipo Velcro.
- Funciona con alimentación eléctrica de red o bajo voltaje, ofreciendo versatilidad de uso.
- Su finalidad es reducir molestias, tensión, hinchazón y adormecimiento, optimizando el flujo sanguíneo y promoviendo la rehabilitación de músculos y articulaciones.

# ESTADO DEL ARTE

## Patente 2

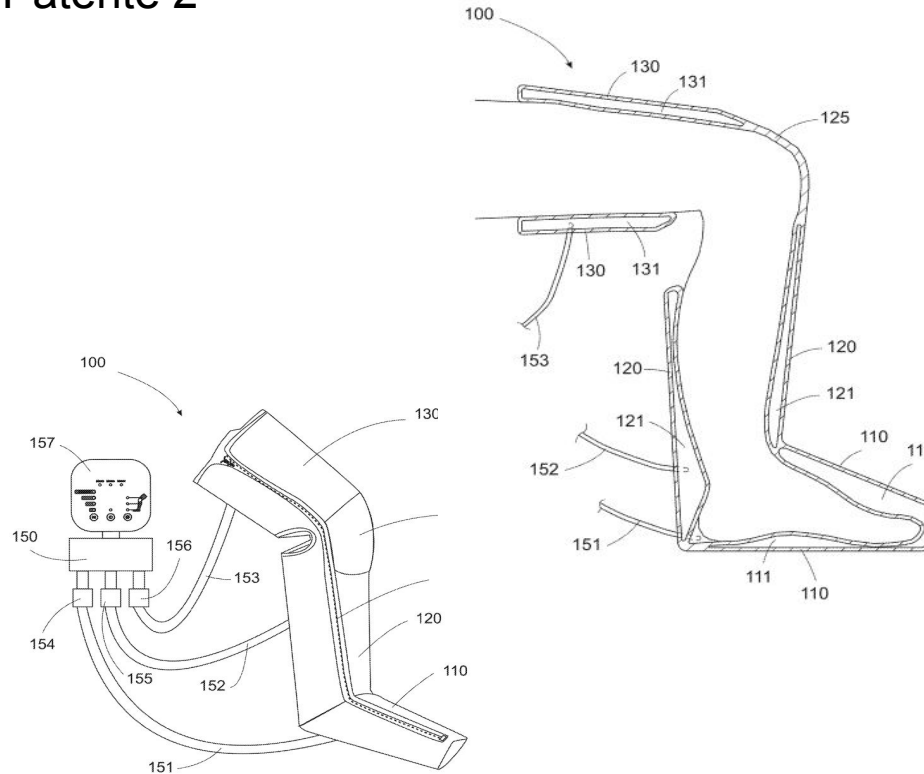

## LEG MASSAGER



- **Número de patente / Publicación:** US20250127679A1
- **Inventores:** Yuanhao FENG, Dongguan Guangdong
- **Año de publicación:** 24 de abril de 2025
- **Entidad solicitante:** Reestar International Limited, Kowloon (HK)

### Resumen Funcional:

- Es un masajeador de pierna completo dividido en secciones flexibles para pie, pantorrilla, rodilla y muslo.
- Integra cámaras internas que se inflan y desinflan mediante un sistema de compresión neumática.
- La compresión es secuencial y está controlada electrónicamente, permitiendo ajustar la presión en cada zona.
- Su objetivo es mejorar la circulación sanguínea y reducir la fatiga muscular.

# ESTADO DEL ARTE

## Patente 3

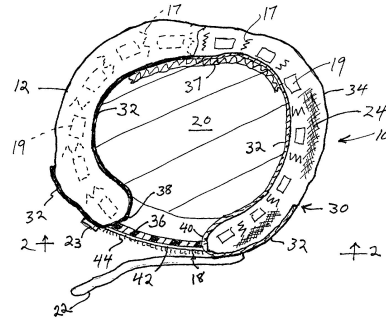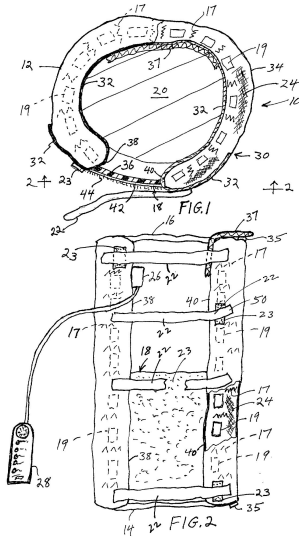

## THERAPEUTIC MASSAGE AND HEATING PAD

- **Número de patente / Publicación:** US 20020169398 A1
- **Inventor:** Tammy Hancock
- **Año de publicación:** 14 de noviembre de 2002
- **Entidad solicitante:** Tammy Hancock

### Resumen Funcional:

- El dispositivo es una almohadilla terapéutica tubular y alargada que permite insertar una pierna o brazo.
- Combina calor localizado mediante elementos calefactores y masaje a través de vibración controlable por el usuario.
- Incluye correas ajustables tipo Velcro.
- Funciona con alimentación eléctrica de red o bajo voltaje, ofreciendo versatilidad de uso.
- Diseño anatómico y de confort: materiales blandos (espuma, fibras de poliéster, algodón, etc.), forma “acolchada”

# ESTADO DEL ARTE

## Producto 1

## MASAJEADOR DE PIERNAS POR COMPRESIÓN CON CALOR RENPHO



Este dispositivo consiste en unas envolturas ajustables que cubren los pies, pantorrillas y muslos. Utiliza compresión de aire secuencial combinada con calor, con el fin de mejorar la circulación y aliviar la tensión muscular. Incluye un mando que permite elegir entre 6 modos de masaje y 4 niveles de intensidad, con apagado automático a los 20 minutos para mayor seguridad.

# ESTADO DEL ARTE

## Producto 2



## BOTAS DE COMPRESIÓN DINÁMICA NORMATEC 3

Este dispositivo integra vibración, compresión neumática y calor, lo cual favorece la estimulación circulatoria y la relajación muscular. Su diseño ergonómico y el uso combinado de estímulos mecánicos y térmicos permiten mejorar la microcirculación y disminuir la rigidez de manera segura y no invasiva. Además, la presencia de niveles de intensidad ajustables facilita su adaptación al nivel de confort del usuario, lo que es especialmente importante en población pediátrica.



# METODOLOGÍA VDI

## **Descripción de la propuesta solución**

- Se plantea el diseño de un dispositivo terapéutico portátil que combine módulos de calor y vibración para aliviar el dolor en las extremidades inferiores.
- El sistema incorporará sensores de temperatura y humedad que aseguren un uso seguro, previniendo daños por exceso de calor o acumulación de sudor durante la terapia.
- El dispositivo estará orientado a uso domiciliario, con una interfaz sencilla e intuitiva que permita su manipulación tanto por el paciente como por su cuidador.

# METODOLOGÍA VDI

## Requerimientos Funcionales

- (Exigente) Aplicar terapia dual de calor y vibración de forma controlada.
- (Exigente) Transmitir el estímulo de manera uniforme sobre la piel.
- (Exigente) Detectar temperatura y humedad para ajustar la terapia en tiempo real.

## Requerimientos No Funcionales

### Seguridad (Exigente)

- Mantener la temperatura en un rango pediátrico seguro (35-38 °C).
- Incluir un sistema de apagado automático por seguridad y al finalizar la terapia.
- Protección contra sobrecalentamiento y fallos eléctricos.

### Usabilidad y Ergonomía (Exigente)


- Diseño adaptable al crecimiento de la paciente.
- Interfaz de control simple e intuitiva.
- Cómodo, ligero y no estigmatizante para garantizar el descanso.

### Materiales y Sostenibilidad


- (Exigente) Textiles hipoalergénicos, transpirables y lavables.
- (Exigente) Diseño modular para fácil limpieza y mantenimiento.
- (Importante) Batería recargable vía USB para mayor practicidad.

# METODOLOGÍA VDI



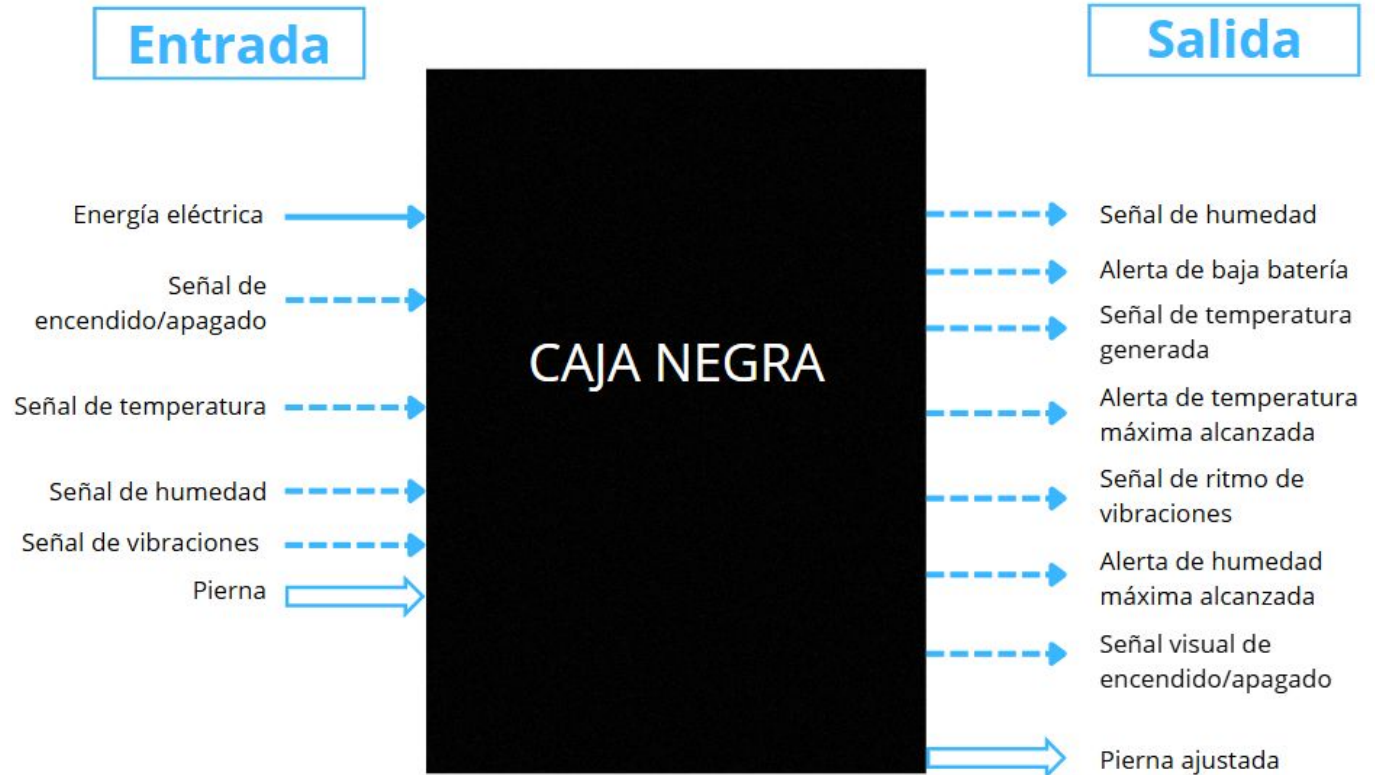



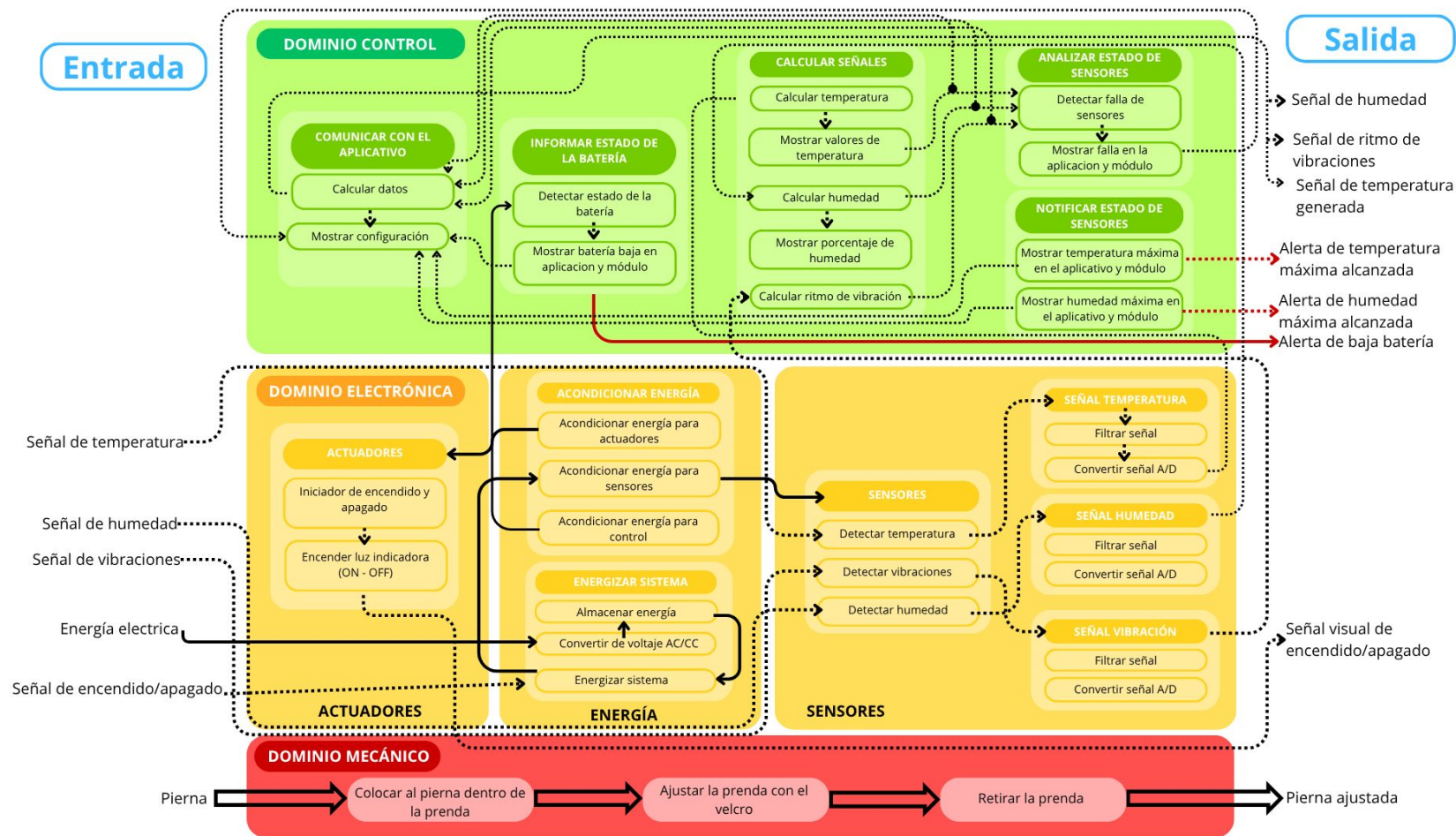




## Caja negra:







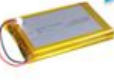















# Esquema de funciones:

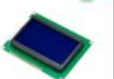




# Matriz morfológica:

Nº	FUNCIÓN	PORTADOR DE FUNCIÓN		
		Primera opción	Segunda opción	Tercera opción
1	ENERGIZAR EQUIPO	 Slide switch	 Rocker switch	 Pulsador
2	ADQUIRIR ENERGÍA ELÉCTRICA AC	 Cable USB	 Adaptador de corriente	 Cargador de pilas
3	CONVERTIR ENERGÍA ELÉCTRICA DE AC/DC	 Fuente reguladora conmutada	 Fuente regulada lineal	
4	ALMACENAR ENERGÍA	 Baterías de	 Baterías de níquel- cadmio	 Baterías Lítio-Ion




		Polímero de Litio	
5		 Microcontroladores	 Mini computador
6	DETECTAR LA HUMEDAD	 Sensor resistivo de humedad	 Sensor capacitivo digital
7	DETECTAR LA TEMPERATURA	 Termistor (NTC o PTC)	 MEMS Microelectromechanical System
8	GENERAR VIBRACIÓN	 Motor de vibración	 Actuador piezoeléctrico vibratorio
9	GENERAR CALOR	 Resistencias calefactoras	 Actuador resonante lineal
		 Películas calefactoras	 Calefactores PTC

		grafeno	
10	ALERTA DE TEMPERATURA ALTA	 Pantalla LCD	 Pantalla OLED
11	ALERTA DE HUMEDAD EXCESIVA	 Buzzer	
12	MATERIAL TEXTIL	 Twill de algodón	 Canvas algodón
13	ADHERIR SENSORES	 Cosido	 Engrapado
			 Tela gabardina

# BOCETO 1 - SOLUCIÓN AZUL

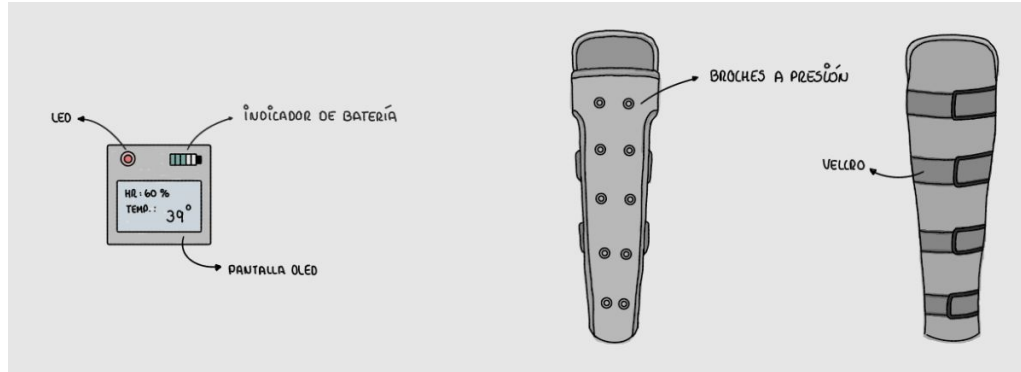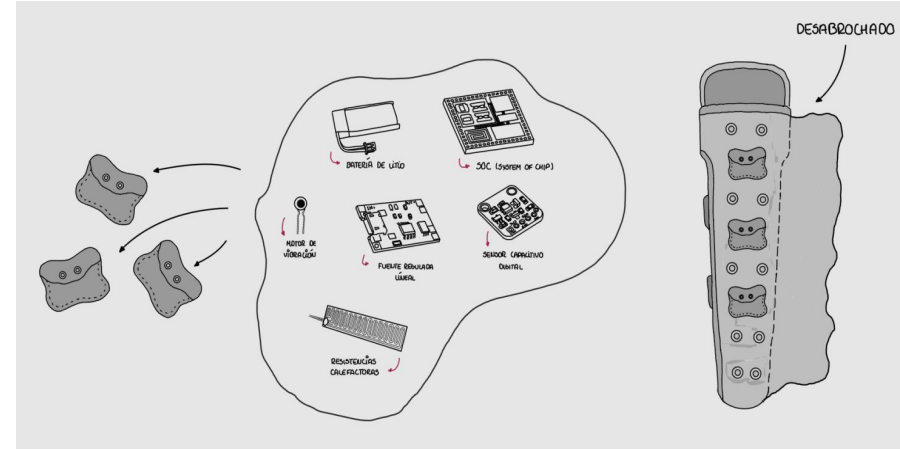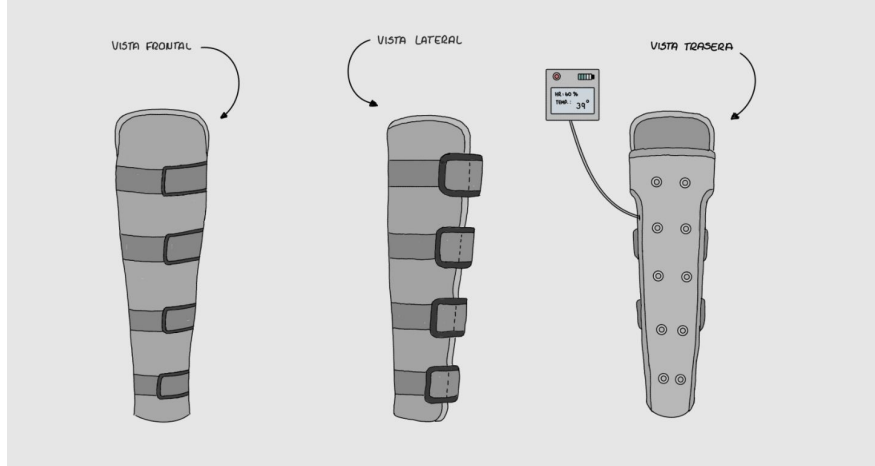

# BOCETO 2 - SOLUCIÓN VERDE

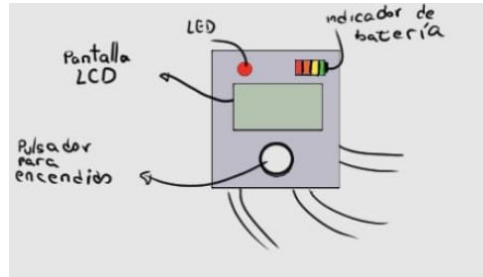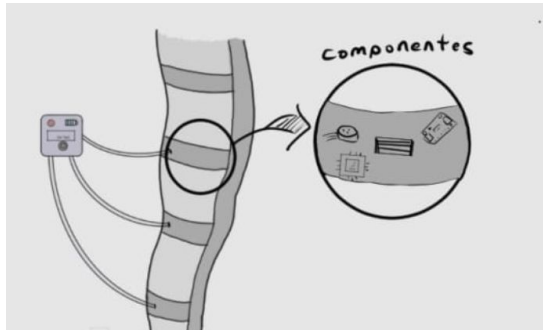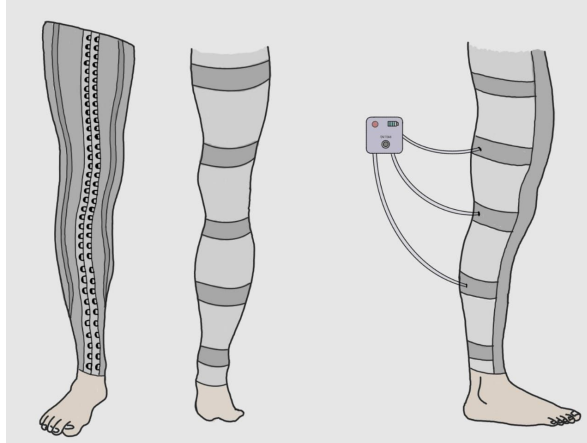

# Conclusiones/siguientes pasos

La paciente presenta dolor y entumecimiento de los miembros inferiores, afectando su descanso, concentración. El impacto sobre su bienestar físico y emocional es significativo, generando una limitación funcional en las actividades de la vida diaria y una disminución en su autonomía. Este contexto refuerza la importancia de abordar la problemática desde la ingeniería biomédica, priorizando soluciones seguras, accesibles y centradas en el usuario.

El análisis de la necesidad funcional permitió establecer que el problema principal radica en la fatiga muscular y la deficiente circulación local, especialmente durante el reposo, lo que justifica el enfoque en estrategias no invasivas y de estimulación externa.

Cómo siguientes pasos, se propone validar los parámetros fisiológicos y térmicos mediante consulta con especialistas en rehabilitación pediátrica. Posteriormente, se realizará una simulación del comportamiento térmico y de vibración para verificar la eficacia y seguridad dentro del rango de 34–38 °C. Finalmente, se plantea la fabricación del prototipo inicial y pruebas de confort y usabilidad, asegurando su correcta adaptación al entorno domiciliario.



# Referencias

[1] Walker SM. Neuropathic pain in children: Steps towards improved recognition and management. EBioMedicine. 2020 Dec;62:103124. doi: 10.1016/j.ebiom.2020.103124. Epub 2020 Nov 25. PMID: 33248373; PMCID: PMC7704400.

[2] Roberts DW. Treating mechanical joint dysfunction in children: a retrospective exploratory report of selected cases. J Man Manip Ther. 2024 Jun;32(3):325-334. doi: 10.1080/10669817.2022.2099182. Epub 2022 Jul 10. PMID: 35815625; PMCID: PMC11216240.

[3] G. J. van Leeuwen, M. M. A. van den Heuvel, P. J. E. A. Bindels, S. M. A. Bierma-Zeinstra, and M. van Middelkoop, "Musculoskeletal pain in 13-year-old children: The Generation R study," Pain, vol. 165, no. 8, pp. 1806–1813, Aug. 2024, doi: 10.1097/j.pain.0000000000003182

[4] C. T. Chambers et al., "The prevalence of chronic pain in children and adolescents: A systematic review update and meta-analysis," Pain, vol. 165, no. 10, pp. 2215–2234, Oct. 2024, doi: 10.1097/j.pain.0000000000003267